

PREMIOFORM

Használati utasítás PREMIOFORM körömszabályozó rendszer



Munkaanyagok:

AKTIVÁLÓ ELEM

Alkoholos törölkendő

OrthoGlue

Csípő (műanyaghoz)


Eldobható applikációs ecset

BASE alap gél


FLUIDGEL folyékony gél

PREMIOLUX polimerizációs lámpa

AKTIVÁLÓ ELEM felülnézetből

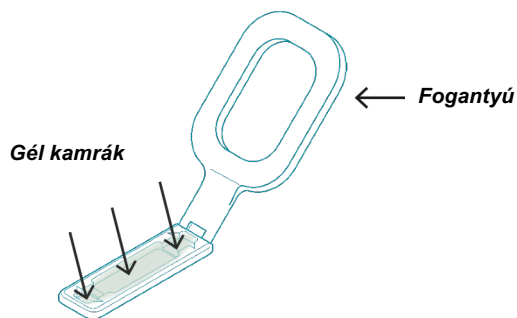

AKTIVÁLÓ ELEM alulnézetből

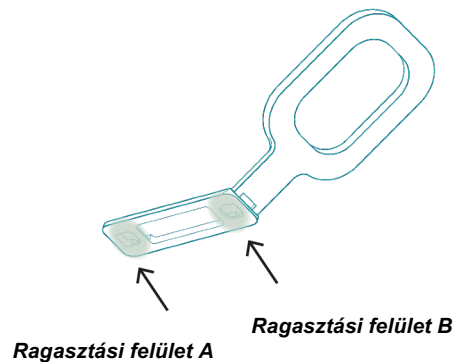

Rendeltetés:

A PREMIOFORM körömszabályozó rendszert deformált és benőtt kéz- és lábkörömök kezelésére használják a köröm fiziológiai növekedésének elősegítése, a fájdalom enyhítése és a köröm alakjának kiegyenesítése érdekében.

A hatás az AKTIVÁLÓ ELEM mechanikusan generált húzóereje által a köröm széleinek enyhe megemelésén, valamint a BASE (alap gél) és FLUIDGEL (folyékony gél) komponensekből álló, fényre keményedő műanyag keverékkel történő későbbi stabilizáláson alapul.

Indikációk:

Unguis convolutus (csőkköröm), unguis incarnatus (benőtt köröm) 1–3 stádiumai - kivéve a kontraindikációk esetén, valamint a műtéti beavatkozás vagy a befejezett onyoxia-kezelés utáni visszaesés megelőzésére.

A használat időtartama:

A használat időtartama a kezdeti állapottól és az egyéni körömnövekedéstől függ. Az ellenőrző vizsgálatok gyakoriságát a beteg kórtörténete alapján kell meghatározni, szükség esetén naponta. A terméket legkésőbb 6 hónap elteltével el kell távolítani. Ha további kezelésre van szükség, használja újra a PREMIOFORM körömszabályozó rendszert.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Ellenjavallatok:

A PREMIOFORM körömszabályozó rendszer az alábbi esetekben kizárólag a kockázat-haszon arány alapos mérlegelése után alkalmazható, és szükség esetén orvossal való konzultációt követően: onychomycosis, onycholysis, növekedési leállás, daganatos elváltozások, köröm alatti granuláció, onychorrhexis, PAD (perifériás artériás betegség) (egyes esetekben), polyneuropathia/angiopathia (egyes esetekben), psoriasis (egyes esetekben), a cianoakrilát-etil-észterre irányuló allergiás reakciók.

Felhasználói kör:

A PREMIOFORM körömszabályozó rendszert kizárólag megfelelő szakmai képzéssel rendelkező szakemberek használhatják. A felhasználóknak ismerniük kell a szükséges higiéniai előírásokat, és tapasztalattal kell rendelkezniük a kezelési kockázatok felismerésében és értékelésében. A nem megfelelő használat következményeiért való felelősség kizárt.

Általános beteg- és felhasználóvédelem:

- minden kezelés előtt tisztítsa meg és fertőtlenítsen a kezelendő körmöt és a környező bőrt.
- viseljen steril eldobható kesztyűt, és saját védelme érdekében használjon arcmaszkot és védőszemüveget is.
- a rögzítőket kizárólag a jelen használati utasításban leírtak szerint és eredeti kiegészítőkkel használja.

Kockázatok:

Fertőzések és higiénia

- A már megrongálódott vagy fertőzött körömlemez, valamint a nem megfelelő higiénia körömgombásodáshoz vagy egyéb fertőzésekhez vezethet.
- A higiéniai előírásokat szigorúan be kell tartani. Az eldobható felhordó ecseteket csak egy páciensnél szabad használni a keresztfertőzés – különösen a gombás fertőzések – elkerülése érdekében. Használat után azokat azonnal, a szabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Az OrthoGlue (cianoakrilát ragasztó) kezelése

- Az OrthoGlue másodpercek alatt összeragasztja a bőrt és a szemhéjakat, és irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt.
- Mindenáron kerülje a szemmel, a bőrrel, sebekkel és a nyálkahártyákkal való érintkezést; ne lélegezze be a gőzöket.
- A sebeket az alkalmazás előtt le kell fedni.
- Szembe kerülés vagy lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A bőrre tapadt részeket ne erőszakkal távolítsa el; helyette áztassa őket hosszú ideig meleg szappanos vízben, vagy óvatosan távolítsa el acetonnal.

A PREMIOFORM BASE és a FLUIDGEL kezelése

- Kerülje a PREMIOFORM BASE és a FLUIDGEL bőrrel és szemmel való érintkezését, mivel irritációt vagy allergiás reakciókat okozhat.
- Bőrrel való érintkezés esetén az érintett területet azonnal alaposan mossa le szappannal és vízzel.
- Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki bő vízzel legalább 10 percig, és forduljon orvoshoz.

UV-sugárzás

- A PREMIOFORM polimerizációs készülék használata közben ne nézzen közvetlenül a fénybe, mivel az UV-sugárzás károsíthatja a szemet.
- Ha a besugárzás során bármilyen kellemetlen érzést tapasztal a szemében, azonnal szakítsa meg a kezelést, és forduljon orvoshoz.










Gőzök és csiszolási por

- A rendszert kizárólag jól szellőző helyiségekben használja.
- Kerülje a csiszolás során keletkező gőzök és por belélegzését, mivel azok irritálhatják a légutakat.

Különleges esetek:

Ha szokatlan tünetek, erős fájdalom, gyulladás vagy egyéb rendellenességek jelentkeznek, azonnal távolítsa el a terméket, fertőtlenítsen az érintett lábujjat, és tegyen rá steril kötést. Azonnal forduljon orvoshoz.

Minden rendellenességet jelentsen a 3TO GmbH-nak (+49 89 4520833-0 / info@3to-gmbh.de).

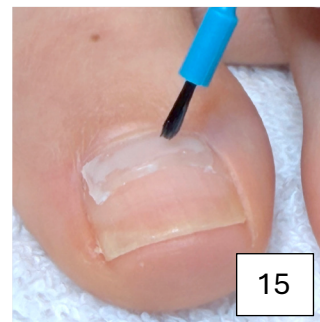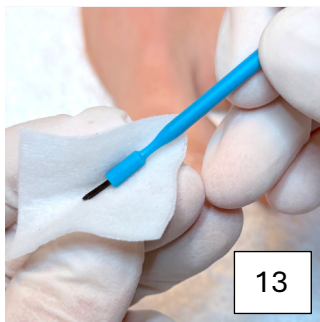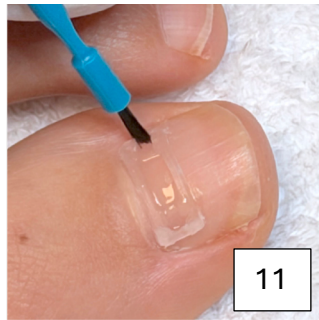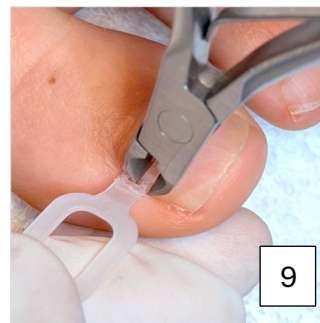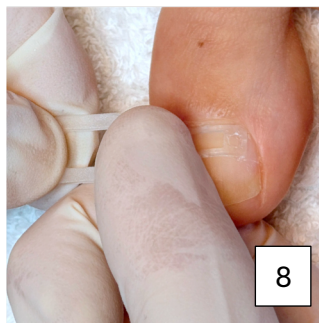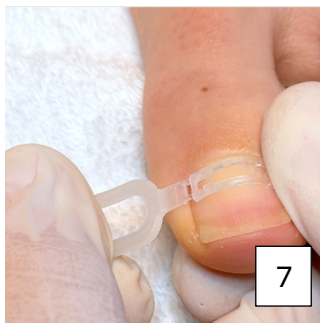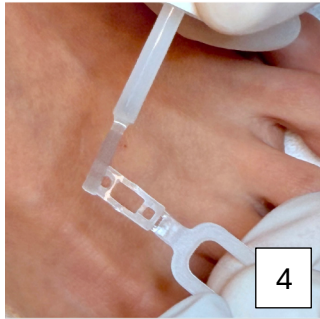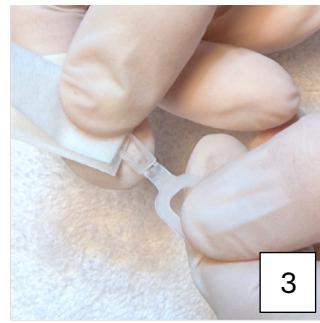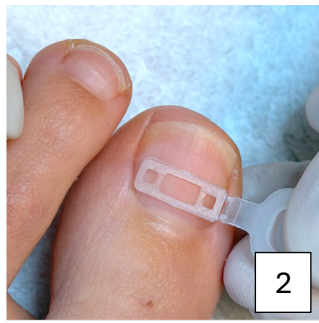

A munkához szükséges eszközök előkészítése

Minden körömszabályozó kezelés előtt sterilizálja a csípőt.

A kezelés előtt ellenőrizze, hogy a PREMIOLUX készülék megfelelően működik-e – szükség esetén töltsse fel.

A köröm előkészítése

1) Távolítsa el a köröm felületéről az esetleges laza részeket. Szükség esetén reszelővel vagy maróval érdesítse fel a köröm felületét. Tisztítsa meg a körmet alkoholos törlőkendővel, és hagyja az alkoholt alaposan megszáradni (legalább 30 másodpercig).

Az AKTIVÁLÓ SZABÁLYZÓ felhelyezése

2) Válassza ki a méretet úgy, hogy az AKTIVÁLÓ ELEM a köröm szélességének minél nagyobb részét fedje le. Figyelembe kell venni az AKTIVÁLÓ ELEM körmön történő tágulását (kb. 0,7–2,7 mm). Ezért olyan aktív elemeket válasszon, amelyek a tágulási hosszúságnál rövidebbek, mint a köröm szélessége.

Az aktív elemet a köröm oldalsó széleihez a lehető legközelebb és a köröm tövéhez a lehető legközelebb kell elhelyezni.

3) Az AKTIVÁLÓ ELEM -et alaposan tisztítsa meg és zsírtalanítsa egy új alkoholos törlőkendővel, majd hagyja az alkoholt teljesen megszáradni (kb. 30 másodperc).

4) Csavarja le a ragasztót, és az ecset mindkét oldalán egyszer-egyszer finoman törölje meg a flakon szélén. Vékony réteg OrthoGlue-t vigyen fel a párna A ragasztófelületére.

A ragasztót csak mértékkel használja!!

Ha túl sok ragasztót használ, a rögzítőelem nem tapad meg a körmön, és a felesleges ragasztó rontja a köröm és a gél közötti tapadást.

Tartsa tisztán a flakon szélét és menetét. Szükség esetén tisztítsa meg őket, pl. alkoholos törlőkendővel.

5) Helyezze az A ragasztófelületet a köröm azon oldalára, ahol a köröm jobban benőtt.

Az A ragasztófelületet ujjával kb. 20 másodpercig nyomja rá a körömrre (ez idő alatt ne mozdítsa el!).

Ezt követően a ragasztót 2 percig érintés nélkül hagyja megkeményedni.

Várjon legalább 2 percet!

6) Óvatosan törölje le az OrthoGlue ecsetet mindkét oldalán. Vékony réteg ragasztót vigyen fel az AKTIVÁLÓ ELEM B ragasztófelületére. Ügyeljen arra, hogy a ragasztott A oldalra ne hasson felfelé irányuló erő, és ne húzza le.

7) Az AKTIVÁLÓ ELEM -t 0,7–2,7 mm-re kell megnyújtani (a rögzítő szélességétől, a köröm vastagságától és a vizsgálati eredményektől függően). Húzza az AKTIVÁLÓ ELEM -et a körömmel párhuzamosan.

8) Helyezze a rögzítőt megnyújtott állapotban a körömrre, és nyomja meg a B ragasztófelületet kb. 30 másodpercig. Ügyeljen arra, hogy a rögzítés után az aktív elem ne mozduljon el.

Ezután a ragasztót 2 percig hagyni kell megkeményedni anélkül, hogy hozzáérne. **Várjon legalább 2 percet!**

9) Helyezze a csípőt felülről a fogantyú csatlakozásaira, és csípje le a fogantyút.

A BASE gél felvitele

10) Tegyen egy kis csepp BASE alapot az AKTIVÁLÓ ELEM mélyedésébe.

11) Az applikációs ecsettel kenje szét az összes gélkamrában a szélekig. A felesleges BASE-t az applikációs ecsettel eltávolíthatja.

Ne vigyen fel túl sokat, csak nedvesítse meg a köröm felületét, és kész is!

12) Kapcsolja be a PREMIOLUX polimerizációs készüléket úgy, hogy a csúszókapcsolót előre tolja, majd tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a 60 másodperces jelzőfény villogni nem kezd. Keményítse a BASE-t a PREMIOLUX készülékkel 60 másodpercig. **Használat után ne távolítsa el a diszperziós réteget!**

(Alacsony akkumulátor-töltöttség: Amikor az akkumulátor töltöttségi szintje 25% alá csökken, a jelzőfény pirosan világít, jelezve, hogy az akkumulátor lemerült. Kérjük, csatlakoztassa az USB-csatlakozót a töltéshez (kb. 3 óra))

13) Tisztítsa meg az applikációs ecsetet az alkoholos törlőkendővel.

A FLUIDGEL felvitele

14) Cseppentsen egy csepp FLUIDGEL-t az AKTIVÁLÓ ELEM mélyedésébe.

15) Az applikációs ecset segítségével kenje szét az összes gélkamrában, amíg az AKTIVÁLÓ ELEM teljesen meg nem telik a felső peremig.

16) A FLUIDGEL-t a PREMIOLUX lámpával 60 másodpercig teljesen keményítse meg.

17) Az alkoholos törülőkendővel törölje le a diszperziós réteget.

A felhordó ecsetet dobja el.


Ha a gélréteg túl vastag, reszelővel vagy frézerrel lecsiszolható.

A körömszabályzó rendszer eltávolítása

19) A körömkorrektíós rendszer eltávolításához emelje meg a rögzítő széleit a csípővel.

20) Ezután a rögzítőt lehúzzhatja.

21) A körömről a ragasztó- és gélmaradványokat reszelővel vagy frézerrel lehet eltávolítani.

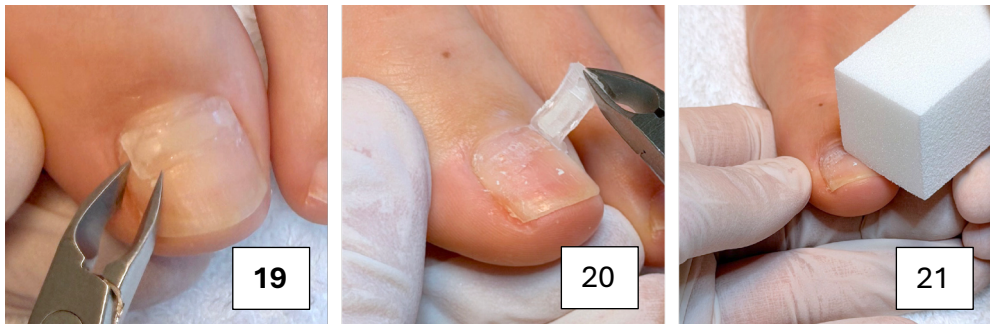

Orvostechnikai eszköz



Gyártó



Kövesse a használati utasítást



Ne használja újra



Katalógus szám



Tételkód



Felhasználhatósági idő



Vegye figyelembe a kiegészítő információkat (biztonsági utasítások)



A CE-jelölés használatával a gyártó igazolja, hogy a termék megfelel az összes vonatkozó európai irányelvnek



Gyártás dátuma