

PREMIOFORM

*Instrucțiuni de utilizare pentru
sistemul de corecție a unghiilor PREMIOFORM*



Materiale de lucru

BRIDĂ DE ACTIVARE

Tampoane cu alcool

OrthoGlue

Clește de tăiere (pentru plastic)

Pensulă de aplicare de unică folosință


BASE

FLUIDGEL


Dispozitiv de fotopolimerizare

PEMIOLUX

BRIDĂ DE ACTIVARE de sus

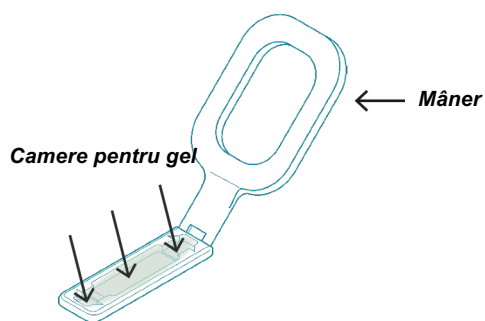

BRIDĂ DE ACTIVARE de jos

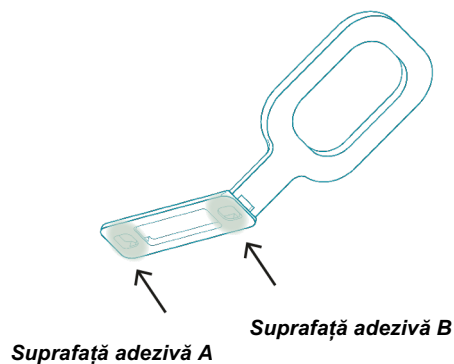

Utilizare prevăzută:

Sistemul de corecție a unghiilor PREMIOFORM este utilizat pentru tratarea unghiilor deformate și încarnate de la mâini și picioare, cu scopul de a favoriza creșterea fiziologică a unghiei, de a ameliora durerea și de a corecta forma unghiei.

Efectul se bazează pe ridicarea ușoară a marginilor unghiei printr-o forță de tracțiune generată mecanic de BRIDA DE ACTIVARE și pe stabilizarea ulterioară prin intermediul unui compus plastic fotopolimerizabil format din componentele BASE și FLUIDGEL.

Indicații:

Unguis convolutus (unghie răsucită), unguis incarnatus (unghie încarnată), stadiile 1–3, cu excluderea contraindicațiilor enumerate mai jos, precum și pentru prevenirea recidivelor după tratamentul chirurgical sau după finalizarea tratamentului de ortonixie.

Durata de utilizare:

Durata de utilizare depinde de constatările inițiale și de creșterea individuală a unghiei. Controalele ulterioare trebuie stabilite în funcție de istoricul medical al pacientului, zilnic dacă este necesar. Produsul trebuie îndepărtat cel târziu după 6 luni. Dacă este necesar un tratament suplimentar, utilizați din nou sistemul de corecție a unghiilor PREMIOFORM.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**Contraindicații:**

Sistemul de corecție a unghiilor PREMIOFORM poate fi utilizat în următoarele cazuri numai după evaluarea atentă a raportului risc-beneficiu și, dacă este necesar, în consultare cu un medic: onicomicoză, onicoliză, oprirea creșterii, modificări tumorale, granulație subunghială, onicorexie, BAP (boală arterială periferică) (în cazuri individuale), polineuropatie/angiopatie (în cazuri individuale), psoriazis (în cazuri individuale), reacții alergice la esterul etilic al cianoacrilatului.

Grup de utilizatori:

Sistemul de corecție a unghiilor PREMIOFORM poate fi utilizat numai de specialiști cu calificarea profesională corespunzătoare. Utilizatorii trebuie să cunoască standardele de igienă necesare și să aibă experiență în recunoașterea și evaluarea riscurilor tratamentului. Răspunderea pentru consecințele utilizării necorespunzătoare este exclusă.

Protecția generală a pacientului și a utilizatorului:

- Înainte de fiecare tratament, curățați și dezinfectați unghia care urmează să fie tratată și pielea din jur.
- Purtați mănuși sterile de unică folosință și, pentru propria protecție, folosiți de asemenea o mască facială și ochelari de protecție.
- Utilizați bridele exclusiv așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare și cu accesorii originale.

Riscuri:**⚠ Infecții și igienă**

- O placă unghială deja deteriorată sau infectată și igiena necorespunzătoare pot favoriza apariția onicomicozei sau a altor infecții.
- Standardele de igienă trebuie respectate cu strictețe. Pensulele de aplicare de unică folosință pot fi utilizate doar la un singur pacient, pentru a evita contaminarea încrucișată, în special cu agenți fungici. După utilizare, acestea trebuie eliminate imediat, în mod corespunzător.

⚠ Manipularea OrthoGlue (adeziv cianoacrilat)

- OrthoGlue lipește pielea și pleoapele în câteva secunde și irită ochii, căile respiratorii și pielea.
- Evitați cu orice preț contactul cu ochii, pielea, rănila și mucoasele; nu inhalați vaporii.
- Rănila trebuie acoperite înainte de aplicare.
- În caz de contact cu ochii sau de ingerare, solicitați imediat asistență medicală.
- Nu utilizați forța pentru a îndepărta eventualele lipiri de piele; în schimb, înmuiați-le timp îndelungat în apă caldă cu săpun sau îndepărtați-le cu grijă cu acetonă.

⚠ Manipularea PREMIOFORM BASE și FLUIDGEL

- Evitați contactul PREMIOFORM BASE și FLUIDGEL cu pielea și ochii, deoarece pot apărea iritații sau reacții alergice.
- În caz de contact cu pielea, spălați imediat și temeinic zona afectată cu apă și săpun.
- În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 10 minute și solicitați asistență medicală.

⚠ Radiații UV

- Nu priviți direct în lumină în timpul utilizării dispozitivului de fotopolimerizare PREMIOLUX, deoarece radiațiile UV pot deteriora ochii.
- Dacă simțiți vreun disconfort la nivelul ochilor în timpul iradierii, opriți imediat tratamentul și consultați un medic.









⚠ Vaporii și praf de șlefuire

- Utilizați sistemul numai în încăperi bine ventilate.
- Evitați inhalarea fumului și a prafului produse în timpul șlefuirii, deoarece acestea pot irita căile respiratorii.

Evenimente neobișnuite:

Dacă apar simptome neobișnuite, dureri severe, inflamații sau alte evenimente neobișnuite, îndepărtați imediat produsul, dezinfectați degetul afectat și aplicați un pansament steril. Consultați imediat un medic.

Raportați orice eveniment neobișnuit către 3TO GmbH (+49 89 4520833-0 / info@3to-gmbh.de).

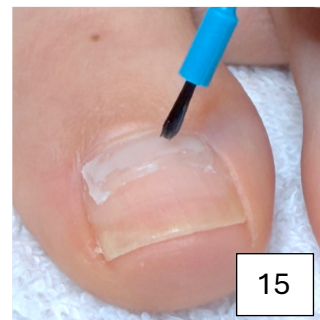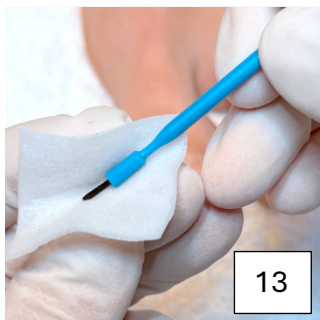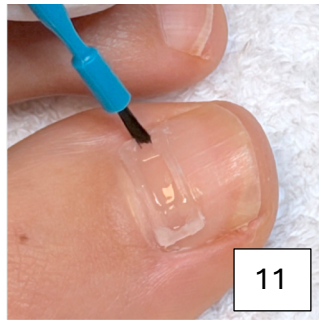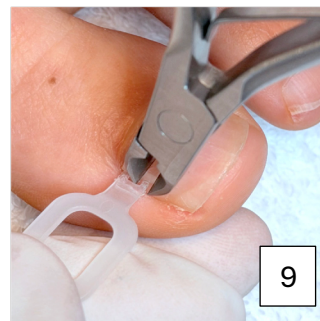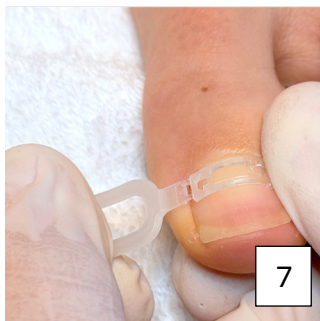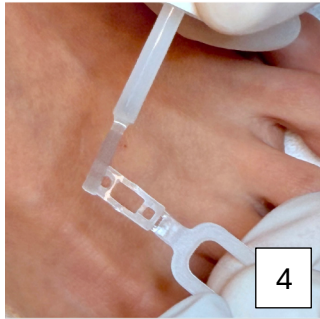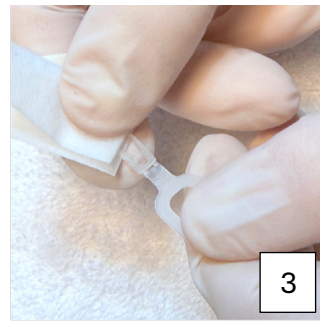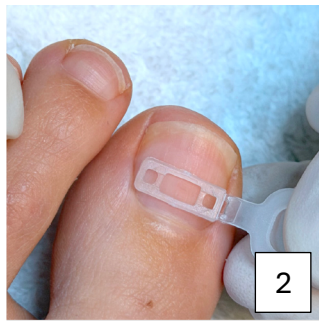

Pregătirea materialelor de lucru

Sterilizați cleștele de tăiere înainte de fiecare tratament cu bridă.

Verificați dacă dispozitivul de fotopolimerizare PREMIOLUX funcționează corect înainte de tratament - încărcați-l dacă este necesar.

Pregătirea unghiei

1) Îndepărtați orice părți desprinse de pe suprafața unghiei. Dacă este necesar, asprați unghia cu o pilă sau o freză.

Curățați unghia cu un tampon cu alcool și lăsați alcoolul să se usuce complet (cel puțin 30 de secunde).

Aplicarea BRIDEI DE ACTIVARE

2) Alegeți dimensiunea astfel încât BRIDA DE ACTIVARE să acopere cât mai mult din lățimea unghiei.

Trebuie să se țină cont de întinderea BRIDEI DE ACTIVARE pe unghie (aprox. 0,7–2,7 mm). Prin urmare, alegeți elemente active care sunt mai scurte decât lățimea unghiei cu valoarea corespunzătoare întinderii.

Elementul activ trebuie plasat cât mai aproape posibil de marginile laterale ale unghiei și cât mai proximal posibil.

3) Curățați și degresați temeinic BRIDA DE ACTIVARE cu un tampon cu alcool nou și lăsați alcoolul să se usuce complet (aprox. 30 de secunde).

4) Deșurubați adezivul și ștergeți ușor pensula pe ambele părți, câte o dată pe marginea flaconului. Aplicați un strat subțire de OrthoGlue pe suprafața adezivă A a plăcuței.

Folosiți adezivul cu moderație!

Dacă folosiți prea mult adeziv, brida nu va adera la unghie, iar aderența dintre unghie și gel va fi afectată de adezivul în exces.

Păstrați curate marginea și filetul flaconului. Curățați-le dacă este necesar, de exemplu, cu un tampon cu alcool.

5) Poziționați suprafața adezivă A pe partea unghiei care este mai încarnată.

Apăsăți suprafața adezivă A pe unghie cu degetul timp de aprox. 20 de secunde (nu o mișcați în acest timp!).

Apoi adezivul trebuie lăsat să se întărească timp de 2 minute, fără alt contact.

Așteptați cel puțin 2 minute!

6) Ștergeți ușor pensula OrthoGlue pe ambele părți. Aplicați un strat subțire de adeziv pe suprafața adezivă B a BRIDEI DE ACTIVARE. Asigurați-vă că nu se aplică nicio forță ascendentă asupra părții lipite A și că aceasta nu se desprinde.

7) BRIDA DE ACTIVARE este întinsă cu 0,7 până la 2,7 mm (în funcție de lățimea bridei, grosimea unghiei și constatări). Trageți BRIDA DE ACTIVARE paralel cu unghia.

8) Așezați brida pe unghie în stare întinsă și apăsați suprafața adezivă B timp de aprox. 30 de secunde. Asigurați-vă că elementul activ nu este deplasat după așezare.

Apoi adezivul trebuie lăsat să se întărească timp de 2 minute, fără alt contact. **Așteptați cel puțin 2 minute!**

9) Așezați cleștele deasupra conexiunilor cu mânerul și tăiați mânerul.

Aplicarea BASE

10) Aplicați o picătură mică de BASE în cavitatea BRIDEI DE ACTIVARE.

11) Distribuți BASE cu pensula de aplicare peste toate camerele pentru gel, până la margini. Excesul de BASE poate fi îndepărtat cu pensula de aplicare.

Nu aplicați prea mult, doar umeziți suprafața unghiei și brida!

12) Activați dispozitivul de polimerizare PREMIOLUX deplasând comutatorul glisant înainte și ținând apăsat butonul de pornire până când indicatorul de 60 de secunde luminează intermitent. Polimerizați BASE cu dispozitivul de polimerizare PREMIOLUX timp de 60 de secunde. **Nu îndepărtați ulterior stratul de dispersie!**

(Baterie descărcată: când capacitatea bateriei scade sub 25%, indicatorul se aprinde roșu, semnalând că bateria este descărcată. Vă rugăm să conectați conectorul USB pentru încărcare (aprox. 3 h).)

13) Curățați pensula de aplicare cu tamponul cu alcool.

Aplicarea FLUIDGEL

14) Aplicați o picătură de FLUIDGEL în cavitatea BRIDEI DE ACTIVARE.

15) Distribuți FLUIDGEL cu pensula de aplicare peste toate camerele pentru gel, până când BRIDA DE ACTIVARE este umplută complet până la marginea superioară.

16) Polimerizați complet FLUIDGEL cu lampa PREMIOLUX timp de 60 de secunde.

17) Ștergeți stratul de dispersie cu tamponul cu alcool.

Eliminați pensula de aplicare.


Dacă stratul de gel este prea gros, acesta poate fi pilit cu o pilă/freză.

Îndepărtarea sistemului de corecție a unghiilor

19) Pentru a îndepărta sistemul de corecție a unghiilor, ridicați marginile bridei cu cleștele.

20) Brida poate fi apoi desprinsă.

21) Orice reziduu de adeziv și gel poate fi îndepărtat de pe unghie cu o pilă sau o freză.

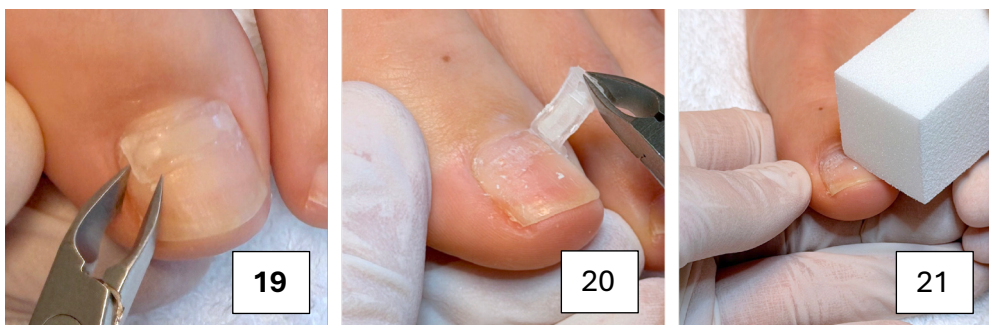

Dispozitiv medical



Producător



Respectați instrucțiunile de utilizare



A nu se reutiliza



Număr de catalog



Cod de lot



A se utiliza până la



Consultați suplimentul informativ (instrucțiuni de siguranță)



Prin aplicarea marcatului CE, producătorul confirmă că produsul respectă toate directivele europene aplicabile



Data fabricației